


# Neomano Instrukcja użytkowania



# Elementy zestawu

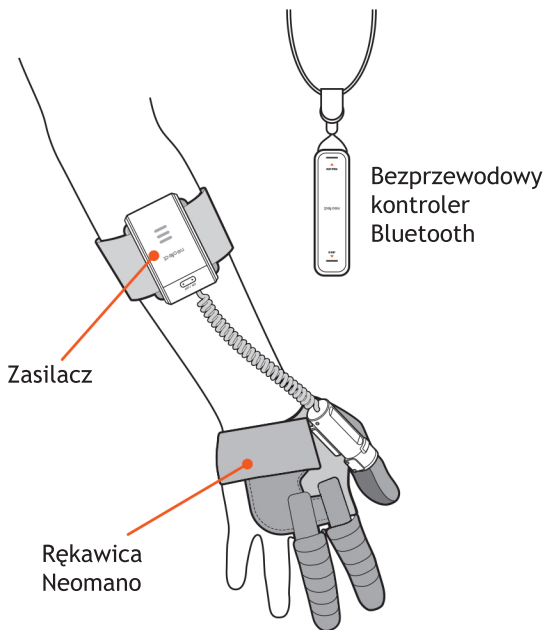

\* Baterie nie znajdują się w zestawie  
\* Jeżeli po użyciu rękawica wymaga czyszczenia, wytrzyj ją suchą szmatką. Rękawicy nie należy myć, ani używać mokrych materiałów do jej czyszczenia

# Instrukcja obsługi



1. Załóż Rękawicę Neomano na dłoń.

\*Owiń pasek od spodu dłoni i zapnij go na wierzchu rękawicy. Pasek napnij z umiarkowaną siłą.



2. Wciśnij przycisk "ON/OFF" na zasilaczu, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj przycisk "ON/OFF" na zasilaczu przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.



3. Przytrzymaj przycisk ❶ "GRIP" na bezprzewodowym kontrolerze, aby chwycić przedmiot. Przytrzymaj pycisk ❷ "RELEASE" na bezprzewodowym kontrolerze, aby wypuścić przedmiot.

\* Jeżeli podczas korzystania z Neofect Neomano poczujesz dyskomfort, wciśnij przycisk "ON/OFF" aby natychmiast zwolnić napięcie urządzenia.

# Jak przełożyć silnik do nowej Rękawicy

\*Zużytą rękawicę można wymienić **na nową**

## Krok 1 - demontaż starej rękawicy



1. Wylóż urządzenie.
2. Chwyc jedną ręką silnik, a drugą Rękawicę i zsuń delikatnie silnik ku dołowi, aby wyciąpić go z uchwytu.



3. Odczep klipsy z korpusu silnika.



4. Rozłącz głowicę silnika od korpusu silnika, a następnie zdejmij starą rękawicę.

## Krok 2 - podłączenie nowej rękawicy



1. Upewnij się, że wycięcie w otworze głowicy silnika ❷ nowej rękawicy znajduje się w jednej linii z metalowym wałkiem korpusu silnika ❶, a następnie połącz ze sobą elementy.



2. Upewnij się, że przewód i logo Neomano są skierowane w przeciwnie strony, a następnie zaczepek klips na uchwycie rękawicy.



3. Wyrównaj boczną szynę uchwytu do wspornika na rękawicy upewniając się, że przewód nie utknął pomiędzy nimi.
4. Przesuń wspornik do góry, aby złożyć. Gotowe!

# Ostrzeżenie

## Ogólne zasady użytkowania

1. Zaprzestań użytkowania rękawicy, jeżeli po użyciu na skórze wystąpiła wysypka, egzema, lub doszło do zaburzenia krążenia krwi.
2. Nie korzystaj z rękawicy podczas snu.
3. Jeżeli podczas użytkowania, albo po użyciu rękawicy odczuwasz ból lub wystąpiła wysypka, skontaktuj się z lekarzem.
4. Przechowuj rękawicę w miejscu o niskiej wilgotności powietrza. Unikaj bezpośredniego oddziaływania słońca na rękawicę.
5. Rękawicy nie należy prać w pralce, suszyć, prasować, ani czyścić chemicznie.
6. Nie używać rękawicy w warunkach podwyższonej wilgotności, ani w miejscach gdzie może dojść do kontaktu z cieczą. Powyższe może spowodować uszkodzenie urządzenia, w tym uszkodzenie elektryczne.
7. Neofect Neomano jest wyrobem medycznym.
8. Odstłonięty przewód może być powodem porażenia elektrycznego.
9. Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru rękawicy. Użytkowanie rękawicy w nieodpowiednim rozmiarze może powodować ból lub dysfunkcje.
10. Nie chwytaj za pomocą rękawicy śliskich i deliktanych przedmiotów.
11. Utrzymuj jednostkę sterującą w warunkach suchych, z dala od źródeł ciepła.

## Przeciwwskazania

1. Wyrób nie przeznaczony do użytku przez osoby o zwiększonym napięciu, lub spastyczności.
2. Nie użytkować na ranach i zainfekowanych powierzchniach skóry.
3. Nie użytkować przy silnym obrzęku.
4. Nie użytkować w przypadku silnych przykurczy, lub deformacji stawów palców.
5. Przed użyciem zaleca się łagodne rozgrzanie dłoni.

## Użytkowanie baterii

1. Nie wkładać baterii z nieprawidłowo ułożonymi biegunami
2. Używaj wyłącznie alkalicznych baterii, lub **akumulatorów** “AA” oraz “AAA”. Nie używaj innego rodzaju źródeł zasilania. Nie wkładaj jednocześnie nowych i zużytych baterii.
3. Wyjmij baterie z kontrolerów, jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez 3 lub więcej miesięcy.



# Specyfikacja techniczna

## Rękawica

Materiał	Skóra, rzep, powłoka antypoślizgowa
Przewód	Nić syntetyczna
Moc chwytu	2 kg (20N)
Pasek	Neopren
Szyna kciuka	Aluminium

## Zasilacz

Napięcie		3.6V
Źródło zasilania		Alkaliczne / 3x AA
Wymiary		51mm x 95mm x 30mm
Waga		65 g (bez baterii)
Czas pracy	Baterie	Maks. 1 godz. 30 min.
	Akumulatory	Maks. 23 godz. 30 min.

## Bezprzewodowy kontroler

Źródło zasilania	Alkaliczne / 2x AAA
Wymiary	31.5mm x 100mm x 26mm
Waga	39 g (bez baterii)
Czas pracy	do 150 dni

# “Nadzieja naszą inspiracją”

Każdy ma w życiu swoje własne cele, ale ostateczny cel jest zawsze ten sam: „żyć szczęśliwie”.

Neofect wierzy, że szczęśliwe życie zaczyna się od znalezienia celu i że można je osiągnąć tylko poprzez zaangażowanie w to, co kochamy.

Nieprzewidziane okoliczności często mają wpływ na nasze szczęście. Niestety, choroby, starzenie się i wypadki są częścią życia. Nierzadko doświadczając tych przeszkód czujemy się zniechęceni lub pokonani.

Neofect istnieje dla tych, którzy niezależnie od wszystkiego dążą do jak najlepszego życia.

Korzystając z przetłomowych badań i innowacyjnej technologii, możemy pomóc Ci odkryć na nowo swój cel i żyć jak najlepiej.

Pozwól, że pomożemy Ci żyć na własnych warunkach. Zaslugujesz na to!

# **Neofect Neomano**

Neomano to robotyczna rękawica, która umożliwia osobom z paraliżem dłoni wykonywanie codziennych czynności. Zapewnia wspomaganie chwytu i utrzymanie przyczepności, po którym następuje jego bierne zwolnienie. Neomano pomaga ludziom nabrać pewności siebie w wykonywaniu codziennych aktywności.

## **Neofect USA, inc.**

530 Howard St #100, San Francisco, CA 94105

Tel. 888-623-8984

Email: [info@neofect.com](mailto:info@neofect.com)

## **Neofect Germany GmbH**

Marcel-Breuer-Str. 15, 80807 Munich, Germany

Tel. +49 89-59081302

Email: [info@neofect.de](mailto:info@neofect.de)

dystributor w Polsce:

## **LIW Care Technology Sp. z o. o.**

ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź

Tel. +48 42 212 35 18

Email: [biuro@liwcare.pl](mailto:biuro@liwcare.pl)